

# 限定カラーモデル発売!!

2024年9月2日(月)受注開始 各色100本限定



LT  
ピンク



ニュー  
エイジカモ  
(迷彩)



ジャスター  
ブラック

## 1 イージーキャリブレーション

専用治具(別売)により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。



## 2 ピペッティング

従来製品よりストローク荷重が最大70%軽減。



## 3 フィンガーレスト

人間工学に基づいた手にフィットする形状。



## 4 ボディ

耐久性をそのままに、従来製品より最大56%軽量化、約70gを実現。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。




## 5 エジェクタパイプ

ワンタッチで脱着でき、細い試験管などに対応。



## 6 スムーズな容量設定

プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。

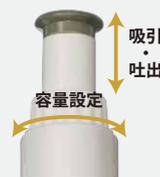

## 7 ボリュームインジケータ

握った際に手に隠れないカウンターディスプレイ。作業中でも容量の確認が容易な設計。



## 8 容量モデル

3箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。



## 9 ハイパープロアシステム

吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。(2、10、20μL機種対応)



※画像は20μL